



TORNILLOS
SOLIDOS

.....

TORNILLOS
CANULADOS



Antes de utilizar el producto

La funcionalidad de los implantes y los instrumentos para operar deberán ser comprobados cuidadosamente antes de cada uso. No presentarán ningún daño. Si hubiera cualquier grieta, fractura, descoloramiento, deformación o daño en los implantes, que puedan ser debidos a un almacenamiento inadecuado, una esterilización imperfecta o un tratamiento preliminar ineficiente, quedará prohibida la utilización de los implantes. El montaje, ajuste y funcionamiento perfecto de los implantes y de todos los instrumentos necesarios será comprobado. En cualquier caso será comprobado el ajuste y funcionamiento junto con las dimensiones y posiciones adecuadas.

Requisitos concernientes al usuario

El juego de herramientas e implantes sólo podrán ser aplicados por médicos con la capacitación adecuada e información especial y experiencia en el área de la utilización de implantes.

El médico que lleve a cabo la operación será responsable de elegir la correcta indicación, tipo de implante y tecnología para la operación.

Contraindicaciones

No se recomiendan los implantes si la salud del paciente presenta dificultades para su aceptación o si se esperan problemas durante el proceso de recuperación, p. ej. reducción en la circulación, sistema óseo de baja calidad o cantidad, la imposibilidad de rehabilitación debido a la condición mental del paciente, etc.

Avisos generales

Antes de la operación se informará al paciente sobre las posibles desventajas que podría conllevar el implante. Se tomarán en cuenta el peso y la actividad del paciente a la hora de elegir el implante adecuado para el tipo de fractura del hueso. La solidez del implante está restringido, de modo que es necesario evitar cargas excesivas por sobrepeso. La carga biomecánica del implante deberá minimizarse lo más posible.

Se controlará el proceso de recuperación durante la aplicación del implante. Los implantes pueden deformarse o dislocarse por una carga repetitiva o una prolongada recuperación del hueso. Esto requiere intervención en el tiempo. Deberá evitarse la repetida deformación del implante. Los implantes son de un solo uso, quedando prohibida su reimplantación. El tipo y tamaño de los implantes deberán ser definidos según cada caso específico. Se deberá estudiar cuidadosamente el manual del usuario de los implantes antes de la operación.

Materiales de aplicación

Los materiales aplicados son de la más alta calidad, desarrollados especialmente para implantes de alta solidez, fabricados con acero inoxidable y aleaciones de titanio no magnéticas.

El uso combinado con productos de otros fabricantes podría dar lugar al comienzo de procesos dañinos de los cuales Medimetal Ltd. no puede hacerse responsable.

Protección del producto, empaquetado, preparación para su uso

Los implantes vienen limpios, sin ninguna contaminación en su producción para el empaquetado. Antes de su utilización se asegurará que las circunstancias preservan la integridad del empaquetado. Se almacenarán en lugar limpio y seco, evitando temperaturas extremas y productos químicos.

Esterilización

Se desempaquetará y esterilizará el implante según las indicaciones antes de su uso.

Se evitará tocarlos con las manos desnudas. La esterilización de los instrumentos se realizará junto con la de la bandeja. Siempre se tendrán en cuenta las instrucciones del fabricante.

Interacción con medicinas

No se tiene constancia de ninguna interacción de los implantes con medicinas.



1008

TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CORTICAL 1.5 mm

			Nº Cat acero	Nº Cat aleación titanio
L				
Diámetro de rosca	1.5 mm	6 mm	11001-15006	31001-15006
Diámetro del centro	1.0 mm	7 mm	11001-15007	31001-15007
Diámetro de la cabeza	3.0 mm	8 mm	11001-15008	31001-15008
Punta	0.5 mm	9 mm	11001-15009	31001-15009
Ancho de talla	1.5 mm	10 mm	11001-15010	31001-15010
Material:		11 mm	11001-15011	31001-15011
Aleación de titanio o acero		12 mm	11001-15012	31001-15012
		14 mm	11001-15014	31001-15014
		16 mm	11001-15016	31001-15016
		18 mm	11001-15018	31001-15018
		20 mm	11001-15020	31001-15020
		22 mm	11001-15022	31001-15022



TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CORTICAL 2.0 mm

		L	Nº Cat acero	Nº Cat aleación titanio
Diámetro de rosca	2.0 mm	6 mm	11001-20006	31001-20006
Diámetro del centro	1.3 mm	8 mm	11001-20008	31001-20008
Diámetro de la cabeza	4.0 mm	10 mm	11001-20010	31001-20010
Punta	0.6 mm	12 mm	11001-20012	31001-20012
Ancho de talla	1.5 mm	14 mm	11001-20014	31001-20014
Material:		16 mm	11001-20016	31001-20016
Aleación de titanio o acero		18 mm	11001-20018	31001-20018
		20 mm	11001-20020	31001-20020
		22 mm	11001-20022	31001-20022
		24 mm	11001-20024	31001-20024
		26 mm	11001-20026	31001-20026
		28 mm	11001-20028	31001-20028
		30 mm	11001-20030	31001-20030
		32 mm	11001-20032	31001-20032
		34 mm	11001-20034	31001-20034
		36 mm	11001-20036	31001-20036
		38 mm	11001-20038	31001-20038
		40 mm	11001-20040	31001-20040



TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CORTICAL 2.7 mm

		L	Nº Cat acero	Nº Cat aleación titanio
Diámetro de rosca	2.7 mm	6 mm	11001-27006	31001-27006
Diámetro del centro	1.9 mm	8 mm	11001-27008	31001-27008
Diámetro de la cabeza	5.0 mm	10 mm	11001-27010	31001-27010
Punta	1.0 mm	12 mm	11001-27012	31001-27012
Ancho de talla	2.5 mm	14 mm	11001-27014	31001-27014
Material:		16 mm	11001-27016	31001-27016
Aleación de titanio o acero		18 mm	11001-27018	31001-27018
		20 mm	11001-27020	31001-27020
		22 mm	11001-27022	31001-27022
		24 mm	11001-27024	31001-27024
		26 mm	11001-27026	31001-27026
		28 mm	11001-27028	31001-27028
		30 mm	11001-27030	31001-27030
		32 mm	11001-27032	31001-27032
		34 mm	11001-27034	31001-27034
		36 mm	11001-27036	31001-27036
		38 mm	11001-27038	31001-27038
		40 mm	11001-27040	31001-27040
		42 mm	11001-27042	31001-27042
		44 mm	11001-27044	31001-27044



TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CORTICAL 3,5/1,75 mm

		L	Nº Cat acero	Nº Cat aleación titanio
Diámetro de rosca	3,5 mm	8 mm	11000-35008	31000-35008
Diámetro del centro	2,0 mm	10 mm	11000-35010	31000-35010
Diámetro de la cabeza	6,0 mm	12 mm	11000-35012	31000-35012
Punta	1,75 mm	14 mm	11000-35014	31000-35014
Ancho de talla	2,5 mm	16 mm	11000-35016	31000-35016
Material:		18 mm	11000-35018	31000-35018
Aleación de titanio o acero		20 mm	11000-35020	31000-35020
		22 mm	11000-35022	31000-35022
		24 mm	11000-35024	31000-35024
		26 mm	11000-35026	31000-35026
		28 mm	11000-35028	31000-35028
		30 mm	11000-35030	31000-35030
		32 mm	11000-35032	31000-35032
		34 mm	11000-35034	31000-35034
		36 mm	11000-35036	31000-35036
		38 mm	11000-35038	31000-35038
		40 mm	11000-35040	31000-35040
		45 mm	11000-35045	31000-35045
		50 mm	11000-35050	31000-35050
		55 mm	11000-35055	31000-35055
		60 mm	11000-35060	31000-35060
		65 mm	11000-35065	31000-35065
		70 mm	11000-35070	31000-35070



TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CORTICAL 3.5/1.25 mm

		L	Nº Cat acero	Nº Cat aleación titanio
Diámetro de rosca	3.5 mm	8 mm	11010-35008	31010-35008
Diámetro del centro	2.4 mm	10 mm	11010-35010	31010-35010
Diámetro de la cabeza	6.0 mm	12 mm	11010-35012	31010-35012
Punta	1.25 mm	14 mm	11010-35014	31010-35014
Ancho de talla	2.5 mm	16 mm	11010-35016	31010-35016
Material:		18 mm	11010-35018	31010-35018
Aleación de titanio o acero		20 mm	11010-35020	31010-35020
		22 mm	11010-35022	31010-35022
		24 mm	11010-35024	31010-35024
		26 mm	11010-35026	31010-35026
		28 mm	11010-35028	31010-35028
		30 mm	11010-35030	31010-35030
		32 mm	11010-35032	31010-35032
		34 mm	11010-35034	31010-35034
		36 mm	11010-35036	31010-35036
		38 mm	11010-35038	31010-35038
		40 mm	11010-35040	31010-35040
		42 mm	11010-35042	31010-35042
		44 mm	11010-35044	31010-35044
		45 mm	11010-35045	31010-35045
		46 mm	11010-35046	31010-35046
		48 mm	11010-35048	31010-35048
		50 mm	11010-35050	31010-35050
		55 mm	11010-35055	31010-35055
		60 mm	11010-35060	31010-35060
		65 mm	11010-35065	31010-35065
		70 mm	11010-35070	31010-35070



TORNILLOS CANULADOS

TORNILLO CORTICAL 3.5 mm

		L	Nº Cat acero	Nº Cat aleación titanio
Diámetro de rosca	3.5 mm	6 mm	11510-35006	31510-35006
Diámetro del centro	2.4 mm	7 mm	11510-35007	31510-35007
Diámetro de la cabeza	5.0 mm	8 mm	11510-35008	31510-35008
Punta	1.25 mm	10 mm	11510-35010	31510-35010
Ancho de talla	2.5 mm	12 mm	11510-35012	31510-35012
Canulación	1.2 mm	14 mm	11510-35014	31510-35014
Material:		16 mm	11510-35016	31510-35016
Aleación de titanio o acero		18 mm	11510-35018	31510-35018
		20 mm	11510-35020	31510-35020
		22 mm	11510-35022	31510-35022
		24 mm	11510-35024	31510-35024
		26 mm	11510-35026	31510-35026
		28 mm	11510-35028	31510-35028
		30 mm	11510-35030	31510-35030
		32 mm	11510-35032	31510-35032
		34 mm	11510-35034	31510-35034
		36 mm	11510-35036	31510-35036
		38 mm	11510-35038	31510-35038
		40 mm	11510-35040	31510-35040
		42 mm	11510-35042	31510-35042
		44 mm	11510-35044	31510-35044
		45 mm	11510-35045	31510-35045
		46 mm	11510-35046	31510-35046
		48 mm	11510-35048	31510-35048
		50 mm	11510-35050	31510-35050
		52 mm	11510-35052	31510-35052
		54 mm	11510-35054	31510-35054
		56 mm	11510-35056	31510-35056
		58 mm	11510-35058	31510-35058
		60 mm	11510-35060	31510-35060
		65 mm	11510-35065	31510-35065
		70 mm	11510-35070	31510-35070



TORNILLOS CANULADOS

TORNILLO MALEOLAR 4.5 mm


		L	Longitud de la rosca	Nº Cat acero	Nº Cat aleacion titanio
Diámetro de rosca	4.5 mm	25 mm	12.5 mm	11530-45025	31530-45025
Diámetro del centro	3.0 mm	30 mm	15.0 mm	11530-45030	31530-45030
Diámetro de la cabeza	8.0 mm	35 mm	17.5 mm	11530-45035	31530-45035
Punta	1.75 mm	40 mm	20.0 mm	11530-45040	31530-45040
Ancho de talla	3.5 mm	45 mm	22.5 mm	11530-45045	31530-45045
Canulación	1.2 mm	45 mm	19.0 mm	11531-45045	31531-45045
Material:		50 mm	25.0 mm	11530-45050	31530-45050
Aleación de titanio o acero		50 mm	21.5 mm	11531-45050	31531-45050
		55 mm	27.5 mm	11530-45055	31530-45055
		60 mm	30.0 mm	11530-45060	31530-45060
		65 mm	32.5 mm	11530-45065	31530-45065
		70 mm	35.0 mm	11530-45070	31530-45070
		75 mm	37.5 mm	11530-45075	31530-45075
		80 mm	40.0 mm	11530- 45080	31530- 45080



TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CANCELLOUS 6.5 mm

Longitud de la rosca	A: 16mm; B: 32 mm; C: fully threaded
Diámetro de rosca	6.5 mm
Diámetro del centro	3.4 mm
Diámetro de la cabeza	8.0 mm
Punta	2.75 mm
Ancho de talla	3.5 mm
Canulación	2.2 mm
Material:	
Aleación de titanio o acero	

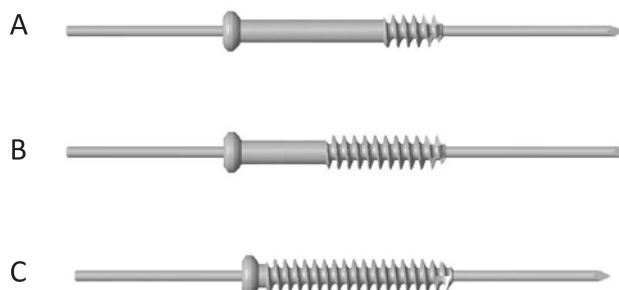

L	A acero	A aleacion titanio	B acero	B aleacion titanio	C acero	C aleacion titanio
14 mm					11561-65014	31561-65014
16 mm					11561-65016	31561-65016
18 mm					11561-65018	31561-65018
20 mm					11561-65020	31561-65020
22 mm					11561-65022	31561-65022
24 mm					11561-65024	31561-65024
25 mm		31581-65025				
26 mm					11561-65026	31561-65026
28 mm					11561-65028	31561-65028
30 mm	11581-65030	31581-65030			11561-65030	31561-65030
35 mm	11581-65035	31581-65035			11561-65035	31561-65035
40 mm	11581-65040	31581-65040	11571-65040	31571-65040	11561-65040	31561-65040
45 mm	11581-65045	31581-65045	11571-65045	31571-65045		
50 mm	11581-65050	31581-65050	11571-65050	31571-65050		
55 mm	11581-65055	31581-65055	11571-65055	31571-65055		
60 mm	11581-65060	31581-65060	11571-65060	31571-65060		
65 mm	11581-65065	31581-65065	11571-65065	31571-65065		
70 mm	11581-65070	31581-65070	11571-65070	31571-65070		
75 mm	11581-65075	31581-65075	11571-65075	31571-65075		
80 mm	11581-65080	31581-65080	11571-65080	31571-65080		
85 mm	11581-65085	31581-65085	11571-65085	31571-65085		
90 mm	11581-65090	31581-65090	11571-65090	31571-65090		
95 mm	11581-65095	31581-65095	11571-65095	31571-65095		
100 mm	11581-65100	31581-65100	11571-65100	31571-65100		
105 mm	11581-65105	31581-65105	11571-65105	31571-65105		
110 mm	11581-65110	31581-65110	11571-65110	31571-65110		
115 mm	11581-65115	31581-65115	11571-65115	31571-65115		
120 mm	11581-65120	31581-65120	11571-65120	31571-65120		
125 mm	11581-65125	31581-65125	11571-65125	31571-65125		
130 mm	11581- 65130	31581- 65130				

TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CANCELLOUS 4.5 mm

		L	Nº Cat acero	Nº Cat aleacion titanio
Diámetro de rosca	4.5 mm	12 mm	11020-45012	31020-45012
Diámetro del centro	3.0 mm	14 mm	11020-45014	31020-45014
Diámetro de la cabeza	8.0 mm	16 mm	11020-45016	31020-45016
Punta	1.75 mm	18 mm	11020-45018	31020-45018
Ancho de talla	3.5 mm	20 mm	11020-45020	31020-45020
Material:		22 mm	11020-45022	31020-45022
Aleación de titanio o acero		24 mm	11020-45024	31020-45024
		26 mm	11020-45026	31020-45026
		28 mm	11020-45028	31020-45028
		30 mm	11020-45030	31020-45030
		32 mm	11020-45032	31020-45032
		34 mm	11020-45034	31020-45034
		36 mm	11020-45036	31020-45036
		38 mm	11020-45038	31020-45038
		40 mm	11020-45040	31020-45040
		42 mm	11020-45042	31020-45042
		44 mm	11020-45044	31020-45044
		46 mm	11020-45046	31020-45046
		48 mm	11020-45048	31020-45048
		50 mm	11020-45050	31020-45050
		52 mm	11020-45052	31020-45052
		54 mm	11020-45054	31020-45054
		56 mm	11020-45056	31020-45056
		58 mm	11020-45058	31020-45058
		60 mm	11020-45060	31020-45060
		65 mm	11020-45065	31020-45065
		70 mm	11020-45070	31020-45070
		75 mm	11020-45075	31020-45075
		80 mm	11020-45080	31020-45080
		85 mm	11020-45085	31020-45085
		90 mm	11020-45090	31020-45090
		95 mm	11020-45095	31020-45095
		100 mm	11020-45100	31020-45100
		105 mm	11020-45105	31020-45105
		110 mm	11020-45110	31020-45110



TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO MALEOLAR 4.5 mm

		L	Longitud de la rosca	Nº Cat acero	Nº Cat aleacion titanio
Diámetro de rosca	4.5 mm	25 mm	12.5 mm	11030-45025	31030-45025
Diámetro del centro	3.0 mm	30 mm	15.0 mm	11030-45030	31030-45030
Diámetro de la cabeza	8.0 mm	35 mm	17.5 mm	11030-45035	31030-45035
Punta	1.75 mm	40 mm	20.0 mm	11030-45040	31030-45040
Ancho de talla	3.5 mm	45 mm	22.5 mm	11030-45045	31030-45045
Material:		50 mm	25.0 mm	11030-45050	31030-45050
Aleación de titanio o acero		55 mm	27.5 mm	11030-45055	31030-45055
		60 mm	30.0 mm	11030-45060	31030-45060
		65 mm	32.5 mm	11030-45065	31030-45065
		70 mm	35.0 mm	11030-45070	31030-45070
		75 mm	37.5 mm	11030-45075	31030-45075
		80 mm	40.0 mm	11030- 45080	31030- 45080



TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CANCELLOUS 4.0 mm

Diámetro de rosca 4.0 mm

Diámetro del centro 1.9 mm


Diámetro de la cabeza 6.0 mm

Punta 1.75 mm

Ancho de talla 2.5 mm

Material:

Aleación de titanio o acero

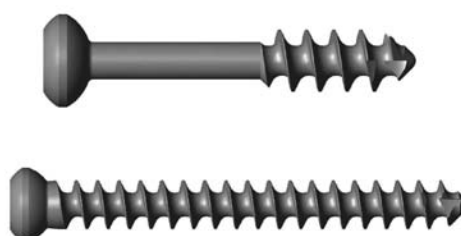

L	Nº Cat acero		Nº Cat aleacion titanio		Longitud de la rosca
	completo	corto	completo	corto	
	roscado		roscado		
10 mm	11041-40010	11051-40010	31041-40010	31051-40010	5
12 mm	11041-40012	11051-40012	31041-40012	31051-40012	5
14 mm	11041-40014	11051-40014	31041-40014	31051-40014	5
16 mm	11041-40016	11051-40016	31041-40016	31051-40016	6
18 mm	11041-40018	11051-40018	31041-40018	31051-40018	7
20 mm	11041-40020	11051-40020	31041-40020	31051-40020	8
22 mm	11041-40022	11051-40022	31041-40022	31051-40022	9
24 mm	11041-40024	11051-40024	31041-40024	31051-40024	10
26 mm	11041-40026	11051-40026	31041-40026	31051-40026	12
28 mm	11041-40028	11051-40028	31041-40028	31051-40028	14
30 mm	11041-40030	11051-40030	31041-40030	31051-40030	14
32 mm	11041-40032	11051-40032	31041-40032	31051-40032	14
35 mm	11041-40035	11051-40035	31041-40035	31051-40035	14
36 mm	11041-40036	11051-40036	31041-40036	31051-40036	14
40 mm	11041-40040	11051-40040	31041-40040	31051-40040	14
45 mm	11041-40045	11051-40045	31041-40045	31051-40045	15
50 mm	11041-40050	11051-40050	31041-40050	31051-40050	15
55 mm	11041-40055	11051-40055	31041-40055	31051-40055	15
60 mm	11041-40060	11051-40060	31041-40060	31051-40060	15
65 mm	11041-40065	11051-40065	31041-40065	31051-40065	15
70 mm	11041-40070	11051-40070	31041-40070	31051-40070	15

TORNILLOS SOLIDOS

TORNILLO CANCELLOUS 6.5 mm

Longitud de rosca A: 16mm; B: 32 mm;
C: fully threaded

Diámetro de rosca 6.5 mm

Diámetro del centro 3.0 mm

Diámetro de la cabeza 8.0 mm

Punta 2.75 mm

Ancho de talla 3.5 mm

Material:

Aleación de titanio o acero



L	A	B	C
14 mm			11061-65014
16 mm			11061-65016
18 mm			11061-65018
20 mm			11061-65020
22 mm			11061-65022
24 mm			11061-65024
25 mm	11081-65025		11061-65025
30 mm	11081-65030		11061-65030
35 mm	11081-65035		11061-65035
40 mm	11081-65040	11071-65040	11061-65040
45 mm	11081-65045	11071-65045	11061-65045
50 mm	11081-65050	11071-65050	11061-65050
55 mm	11081-65055	11071-65055	11061-65055
60 mm	11081-65060	11071-65060	11061-65060
65 mm	11081-65065	11071-65065	11061-65065
70 mm	11081-65070	11071-65070	11061-65070
75 mm	11081-65075	11071-65075	11061-65075
80 mm	11081-65080	11071-65080	11061-65080
85 mm	11081-65085	11071-65085	11061-65085
90 mm	11081-65090	11071-65090	11061-65090
95 mm	11081-65095	11071-65095	11061-65095
100 mm	11081-65100	11071-65100	11061-65100
105 mm	11081-65105	11071-65105	11061-65105
110 mm	11081-65110	11071-65110	11061-65110
115 mm	11081-65115	11071-65115	11061-65115
120 mm	11081-65120	11071-65120	11061-65120
125 mm	11081-65125	11071-65125	
130 mm	11081-65130	11071-65130	
135 mm		11071-65135	

TORNILLOS CANULADOS

TORNILLO CORTICAL 4.5 mm


		L	Nº Cat acero	Nº Cat aleacion titanio
Diámetro de rosca	4.5 mm	12 mm	11520-45012	31520-45012
Diámetro del centro	3.0 mm	14 mm	11520-45014	31520-45014
Diámetro de la cabeza	8.0 mm	16 mm	11520-45016	31520-45016
Punta	1.75 mm	18 mm	11520-45018	31520-45018
Ancho de talla	3.5 mm	20 mm	11520-45020	31520-45020
Canulación	1.2 mm	22 mm	11520-45022	31520-45022
Material:		24 mm	11520-45024	31520-45024
Aleación de titanio o acero		26 mm	11520-45026	31520-45026
		28 mm	11520-45028	31520-45028
		30 mm	11520-45030	31520-45030
		32 mm	11520-45032	31520-45032
		34 mm	11520-45034	31520-45034
		36 mm	11520-45036	31520-45036
		38 mm	11520-45038	31520-45038
		40 mm	11520-45040	31520-45040
		42 mm	11520-45042	31520-45042
		44 mm	11520-45044	31520-45044
		46 mm	11520-45046	31520-45046
		48 mm	11520-45048	31520-45048
		50 mm	11520-45050	31520-45050
		52 mm	11520-45052	31520-45052
		54 mm	11520-45054	31520-45054
		56 mm	11520-45056	31520-45056
		58 mm	11520-45058	31520-45058
		60 mm	11520-45060	31520-45060
		65 mm	11520-45065	31520-45065
		70 mm	11520- 45070	31520- 45070



TORNILLOS CANULADOS

TORNILLO CANCELLOUS 4.0 mm

Diámetro de rosca	4.0 mm
Diámetro del centro	2.2 mm
Diámetro de la cabeza	6.0 mm
Punta	1.75 mm
Ancho de talla	2.5 mm
Material:	1.2 mm
Aleación de titanio o acero	

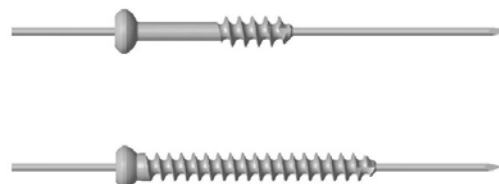


L	Nº Cat acero		Nº Cat aleacion titanio		Longitud de la rosca
	completo	corto	completo	corto	
	roscado		roscado		
10 mm	11541-40010	11551-40010	31541-40010	31551-40010	5
12 mm	11541-40012	11551-40012	31541-40012	31551-40012	5
14 mm	11541-40014	11551-40014	31541-40014	31551-40014	5
16 mm	11541-40016	11551-40016	31541-40016	31551-40016	6
18 mm	11541-40018	11551-40018	31541-40018	31551-40018	7
20 mm	11541-40020	11551-40020	31541-40020	31551-40020	8
22 mm	11541-40022	11551-40022	31541-40022	31551-40022	9
24 mm	11541-40024	11551-40024	31541-40024	31551-40024	10
26 mm	11541-40026	11551-40026	31541-40026	31551-40026	12
28 mm	11541-40028	11551-40028	31541-40028	31551-40028	14
30 mm	11541-40030	11551-40030	31541-40030	31551-40030	14
32.5 mm	11541-40032	11551-40032	31541-40032	31551-40032	14
35 mm	11541-40035	11551-40035	31541-40035	31551-40035	14
37.5 mm	11541-40037		31541-40037		14
40 mm	11541-40040	11551-40040	31541-40040	31551-40040	14
42.5 mm	11541-40042		31541-40042		14
45 mm	11541-40045	11551-40045	31541-40045	31551-40045	15
50 mm	11541-40050	11551-40050	31541-40050	31551-40050	15
55 mm	11541-40055	11551-40055	31541-40055	31551-40055	15
60 mm	11541-40060	11551-40060	31541-40060	31551 -40060	15
65 mm	11541-40065		31541-40065		15
70 mm	11541 -40070		31541 -40070		15

TORNILLOS CANULADOS

TORNILLO CANCELLOUS 7.0 mm

Longitud de rosca	A: 16 mm B: 32 mm;
Diámetro de rosca	7 mm
Diámetro del centro	3.9 mm
Diámetro de la cabeza	8.0 mm
Punta	2.75 mm
Ancho de talla	3.5 mm
Material:	2.2 mm
Aleación de titanio o acero	

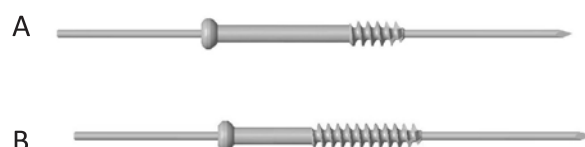

L	Nº Cat acero A	Nº Cat aleacion titanio A	Nº Cat acero B	Nº Cat aleacion titanio B
25 mm	11600-70025	31600-70025		
30 mm	11600-70030	31600-70030		
35 mm	11600-70035	31600-70035		
40 mm	11600-70040	31600-70040	11590-70040	31590-70040
45 mm	11600-70045	31600-70045	11590-70045	31590-70045
50 mm	11600-70050	31600-70050	11590-70050	31590-70050
55 mm	11600-70055	31600-70055	11590-70055	31590-70055
60 mm	11600-70060	31600-70060	11590-70060	31590-70060
65 mm	11600-70065	31600-70065	11590-70065	31590-70065
70 mm	11600-70070	31600-70070	11590-70070	31590-70070
75 mm	11600-70075	31600-70075	11590-70075	31590-70075
80 mm	11600-70080	31600-70080	11590-70080	31590-70080
85 mm	11600-70085	31600-70085	11590-70085	31590-70085
90 mm	11600-70090	31600-70090	11590-70090	31590-70090
95 mm	11600-70095	31600-70095	11590-70095	31590-70095
100 mm	11600-70100	31600-70100	11590-70100	31590-70100
105 mm	11600-70105	31600-70105	11590-70105	31590-70105
110 mm	11600-70110	31600-70110	11590-70110	31590-70110
115 mm	11600-70115	31600-70115	11590-70115	31590-70115
120 mm	11600-70120	31600-70120	11590-70120	31590-70120
125 mm	11600-70125	31600-70125	11590-70125	31590-70125
130 mm	11600 -70130	31600 -70130	11590-70130	31590-70130



Dionisio Riduejo, Nº 2 - 1º Ext.
33008 · Oviedo (Asturias)
Tel. 902 830 049 · Fax. 984 283 718
acmedica@acmedica.es

www.acmedica.es